

Asterasys License Activation Instructions

Updated on Jun/2022 – (english version)

In this guide, we will show you how to activate your Asterasys device.

Continue below to get started.


Purchase your license

To activate your device with your license, you will first need to create an account with Medtech Digital. If you already have one, just make sure to use the same login to purchase your new license, so that all your licenses are registered to the same account. Otherwise, create a new one and take note of the email address and password.

1. Go to Medtech Digital [registration page](#).
2. Chose between Login (registered users) or Register (new users).
3. Enter your *username*, a valid e-mail address, and then click **Log in** or **Register**.
4. Check your inbox for Medtech Digital e-mail titled your username to reset your password.
 - If you don't see the e-mail in your inbox, be sure to check your spam/junk folder.

My account

Login

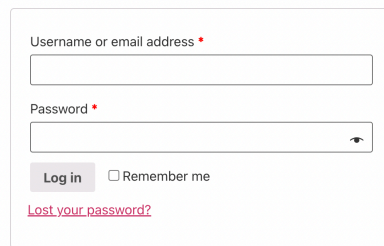


Username or email address *

Password *

Remember me

[Lost your password?](#)

Register

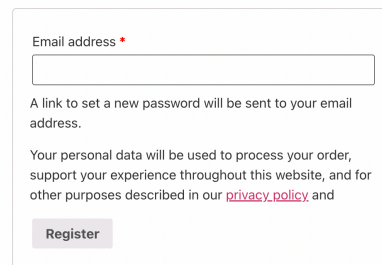

Email address *


A link to set a new password will be sent to your email address.

Your personal data will be used to process your order, support your experience throughout this website, and for other purposes described in our [privacy policy](#) and

Enter your license into your device

Remember: you will need to purchase your device from the manufacturer, local distributor, or re-seller to enter your license. “Device” means a hardware system that runs the operational software and graphical user interface that need to be activated by your license.

To enter your license into the device, make sure to have your device connected to a power source to run it for the first time. Once you run it for the first time you will get one of the following screens, depending on the device you have purchased.

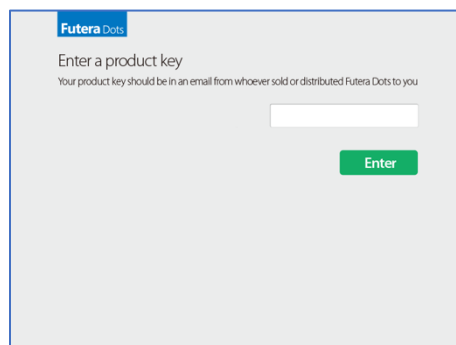


Futera Dots

Enter a product key

Your product key should be in an email from whoever sold or distributed Futera Dots to you

Futera Dots product key screen.

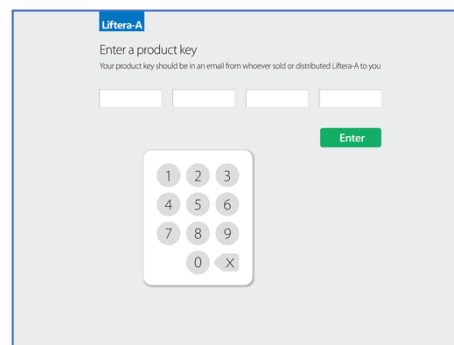

Liftera-A


Enter a product key

Your product key should be in an email from whoever sold or distributed Liftera-A to you


1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 X

Liftera-A product key screen.

1. Write down your Product Key sent to you by email. Your product key is in your invoice, and has the following format: XXXX-YYYY-WWWW-ZZZZ

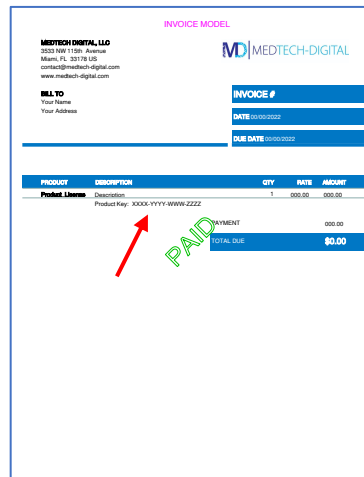

2. Type the Product key on your device booting screen.

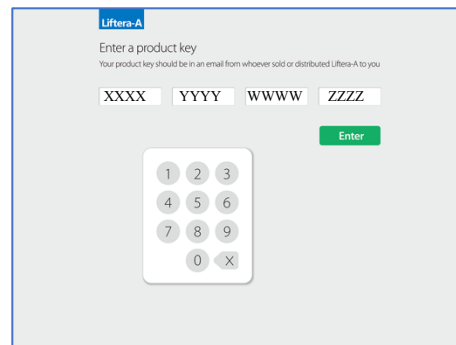

3. Wait few seconds until your product is unlocked.
4. Your product is registered and unlocked.



If you have any questions or problems to enter your Product Key, please contact us at contact@medtech-digital.com.

Instruções de Ativação da Licença Asterasys

Actualizado em Jun/2022 - (versão em português)

Neste guia, mostraremos como ativar o seu dispositivo Asterasys.

Continue abaixo para começar.

Adquira a sua licença


Para activar o seu dispositivo com a sua licença, terá primeiro de criar uma conta na Medtech Digital. Se já tiver uma, certifique-se apenas de utilizar o mesmo login para comprar a sua nova licença, de modo a que todas as suas licenças sejam registadas na mesma conta. Caso contrário, crie uma nova conta e tome nota do endereço de correio electrónico e da palavra-passe.

1. Ir para a [página de registo](#) da Medtech Digital.
2. Escolha entre Login (utilizadores registados) ou Registrar (novos utilizadores).
3. Digite o seu nome de utilizador, um endereço de e-mail válido, e depois clique em **Entrar** ou **Registrar**.
4. Procure pelo email da Medtech Digital em sua caixa de correio eletrônico com o seu nome de utilizador para redefinir a sua palavra-passe.
5. Se não encontrar o e-mail na sua caixa de entrada, certifique-se de verificar a sua pasta de spam/junk.

Entre com sua licença em seu dispositivo

Lembre-se: você precisará comprar seu dispositivo do fabricante, distribuidor local ou revendedor para inserir sua licença. "dispositivo" significa um sistema de hardware que executa o software operacional e a interface gráfica do usuário que precisam ser ativados pela sua licença.


Para inserir sua licença no dispositivo, certifique-se de ter seu dispositivo conectado a uma fonte de energia para executá-lo pela primeira vez. Depois de executá-lo pela primeira vez, você terá uma das seguintes telas, dependendo do dispositivo que você comprou.

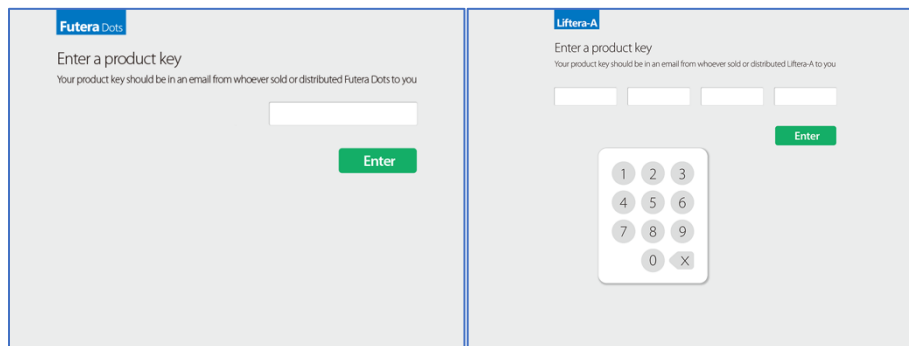


Futera Dots – tela de entrada da licença.

Lifera-A – tela de entrada da licença.

1. Anote sua chave de produto enviada por e-mail. Sua chave de produto está em sua fatura, e tem o seguinte formato: XXXX-YYYY-XXXX-XXXX.

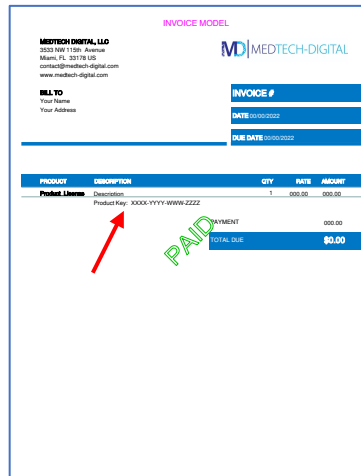

2. Digite a chave de produto na tela de inicialização do dispositivo.

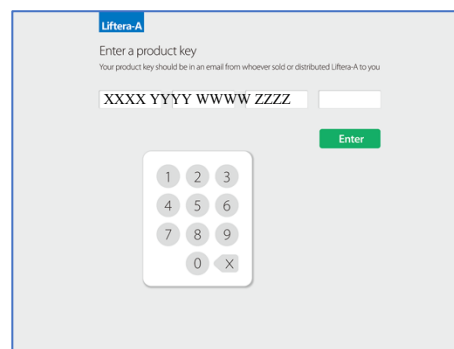

3. Espere alguns segundos até que seu produto esteja desbloqueado.
4. Seu produto está registrado e desbloqueado.



Se você tiver alguma dúvida ou problema para inserir sua chave de produto, entre em contato conosco em contact@medtech-digital.com.

Instrucciones para la activación de la licencia de Asterasys

Actualizado en Jun/2022 - (versión en español)

En esta guía, le mostraremos cómo activar su dispositivo Asterasys.

Continúe a continuación para comenzar.

Compre su licencia


Para activar su dispositivo con su licencia, primero tendrá que crear una cuenta con Medtech Digital. Si ya tiene una, asegúrese de utilizar el mismo nombre de usuario para comprar su nueva licencia, de modo que todas sus licencias estén registradas en la misma cuenta. De lo contrario, cree una nueva cuenta y anote la dirección de correo electrónico y la contraseña.

1. Vaya a la página de registro de Medtech Digital.
2. Elija entre Login (usuarios registrados) o Registro (nuevos usuarios).
3. Introduzca su nombre de usuario, una dirección de correo electrónico válida y, a continuación, haga clic en iniciar sesión o Registrarse.
4. Busque el correo electrónico de Medtech Digital en su bandeja de entrada con su nombre de usuario para restablecer su contraseña.
 - Si no encuentra el correo electrónico en su bandeja de entrada, asegúrese de revisar su carpeta de correo no deseado.

Introduzca su licencia en su dispositivo

Recuerde: tendrá que comprar su dispositivo al fabricante, al distribuidor local o al revendedor para introducir su licencia. "Dispositivo" significa un sistema de hardware que ejecuta el software operativo y la interfaz gráfica de usuario que necesita ser activado por su licencia.


Para introducir su licencia en el dispositivo, asegúrese de que tiene el dispositivo conectado a una fuente de alimentación para ejecutarlo por primera vez. Después de ejecutarlo por primera vez, obtendrá una de las siguientes pantallas, dependiendo del dispositivo que haya adquirido.

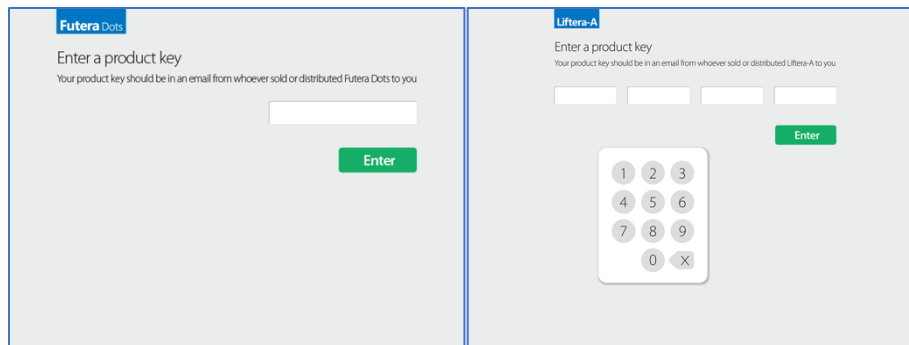


Futera Dots - Pantalla de entrada de licencias.

Liftera-A - pantalla de entrada de la licencia.

1. Anote la clave del producto que le han enviado por correo electrónico. Su clave de producto está en su factura, y tiene el siguiente formato: XXXX-YYYY-XXXX-XXXX.

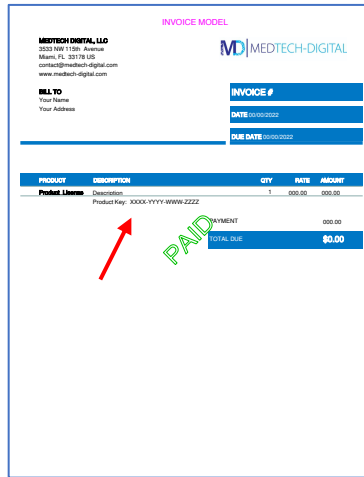

2. Introduzca la clave del producto en la pantalla de arranque del dispositivo.

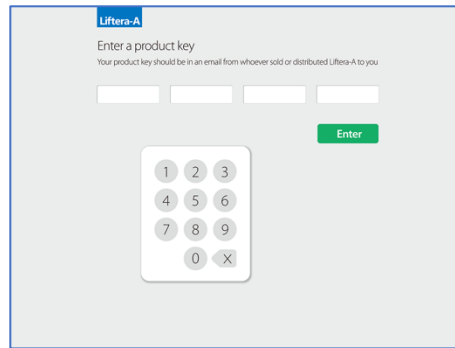

3. Espere unos segundos hasta que su producto se desbloquee.
4. Su producto está registrado y desbloqueado.



Si tiene alguna duda o problema para introducir su clave de producto, póngase en contacto con nosotros en contact@medtech-digital.com.